


<p>Do not use if pouch has been damaged or opened. Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt oder geöffnet ist. Använd inte skadad eller öppnad förpackning. Ikke bruk hvis forpakningen er skadet eller åpenet. Non utilizzare se la busta è stata aperta o danneggiata. Ne pas utiliser si l'emballage du pansement a été ouvert ou est endommagé. No utilizar si el estuche está dañado o abierto. Eğer poş zarar görmüş veya açılmış ise kullanmayın.</p>		<p>Keep away from sunlight and heat. Vor Sonnenlicht und Hitze schützen. Håll borta från solljus och värme. Ikke utsett produktet for sollys og varme. Tenere lontano dalla luce solare e dal calore. Garder à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur. Mantener fuera del alcance de la luz solar y el calor. Güneş ışığı ve ısıdan koruyun.</p>	
<p>Store ≤30°C (86°F). Bei ≤30°C (86°F) lagern. Förvara i ≤30°C (86°F). Lagre ved ≤30°C (86°F). Conservare a ≤30°C (86°F). Conserver à une température ≤30°C (86°F). Conservar a ≤30°C (86°F). ≤30°C (86°F) ve altındaki sıcaklıklarda saklayın.</p>		<p>Not made with natural rubber latex. Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt. Produkten är inte tillverkad av naturgummillatex. Ikke laget av naturlig lateks. Privo di lattice di gomma naturale. Ne contient pas de latex naturel. No están hechos de látex de caucho natural. Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.</p>	
		<p>Single use. Do not re-use. Zum Einmalgebrauch. Nicht wiederverwenden. För engångsbruk. Återanvänd inte. Til engangsbruk. Ikke bruk om igjen. Monouso. Non riutilizzare. À usage unique. Ne pas réutiliser. Desechables. No reutilizar. Tek kullanımlıdır. Tekrar kullanmayın.</p>	

by **PolyMem®**
SPORTSWRAP®



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301
www.polymem.com
© 2026 Ferris Mfg. Corp.® or ™ indicate trademark

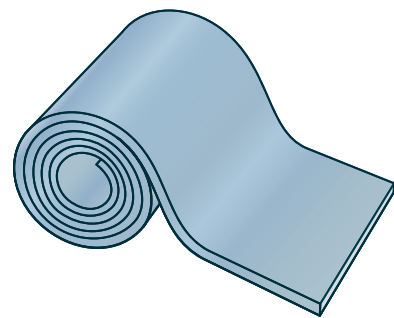

Emergo Asia Pacific Pty Ltd
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



AW-0540_R02 0326
FMC-5994_R7 0326

EN

ROLL Long-Lasting, Drug-Free Pain Relief

PRODUCT DESCRIPTION

SportsWrap is a patented, hydrophilic, polyurethane membrane pad. The semi-permeable continuous thin film backing is optimized for moisture vapor permeability.

INDICATIONS

For the local management of swelling, inflammation, bruising, stiffness or pain due to acute or chronic injury when the skin is intact.

PRECAUTIONS

Consult your physician for all serious injuries, and if symptoms persist after wearing or increase during use. Not sterile. Not for broken skin or open wounds. For external use only.

PREPARATION

Clean the skin of dirt, topical medications and lotions. Residual moisture on skin is beneficial.

APPLICATION

Apply as soon as possible after injury. SportsWrap provides flexibility of application.

No matter which method of application you use or which part of the body you choose to wrap, the following steps will apply:

- Step 1** Unroll the green pad with "THIS SIDE OUT" away from the skin.
- Step 2** Wrap in a continuous motion overlapping slightly.
- Step 3** Secure pad with athletic or adhesive tape.

Wrap firmly for close contact with the skin but apply gently to maintain comfort. The green pad must maintain intimate contact with the skin to work effectively.

TRIMMING

Depending on anatomy and wrapping technique, the SportsWrap may be too long. The green pad can be trimmed with a pair of scissors if necessary. Return the unused portion to the resealable pouch. Overlap to ensure complete coverage.



WEARING

- Wear all day and night for 5 days.
- Avoid wetting the wrap. Remove before bathing or showering.
- If the green pad becomes saturated with sweat, discard and replace. The wrap cannot be "dried out" and reused.
- Another SportsWrap may be worn for an additional 5 days. Continued use will help promote continued comfort.
- Keep wearing even when you feel better!
- Adjust periodically to maintain contact and comfort.

STORAGE

Keep dry and store at room temperature and humidity.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported, by the user and/or patient, to Ferris Mfg. Corp. and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

ES

ROLLO Alivio duradero del dolor sin medicamentos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SportsWrap es una almohadilla de membrana de poliuretano hidrófilo patentada. El revestimiento de película fina continua semipermeable está optimizado para la permeabilidad al vapor de humedad.

INDICACIONES

Para el tratamiento local de hinchazón, inflamación, hematomas, rigidez o dolor por lesiones agudas o crónicas cuando la piel esté intacta.

PRECAUCIONES

Consulte a su médico en caso de lesiones graves y si los síntomas persisten después de usar el producto o aumentan durante su uso. No es estéril. No utilizar sobre piel lesionada o heridas abiertas. Solo para uso externo.

PREPARACIÓN

Limpie la piel de suciedad, medicamentos tópicos y lociones/cremas. La humedad residual en la piel es beneficiosa.

APLICACIÓN

Aplique el producto lo antes posible después de la lesión. SportsWrap ofrece flexibilidad de aplicación.

Independientemente del método de aplicación que utilice o de la parte del cuerpo que elija vendar, los siguientes pasos se aplicarán:

- Paso 1** Desenrolle la almohadilla verde con la indicación «THIS SIDE OUT» (este lado hacia afuera) alejada de la piel.
- Paso 2** Coloque la venda con un movimiento continuo, superponiéndola ligeramente.
- Paso 3** Fije la almohadilla con cinta deportiva o esparadrapo.

Coloque la venda firmemente para un contacto cercano con la piel, pero aplíquela suavemente para mantener la comodidad. La almohadilla verde debe mantener un contacto íntimo con la piel para funcionar eficazmente.

RECORTE

Dependiendo de la anatomía y la técnica de vendaje, SportsWrap podría resultar demasiado largo. La almohadilla verde se puede recortar con tijeras, de ser necesario. Vuelva a colocar la parte no utilizada en la bolsa resellable. Superponga la venda para garantizar una cobertura completa.



USO

- Use el producto durante todo el día y toda la noche por 5 días.
- Evite mojar la venda. Quítesela antes de bañarse o ducharse.
- Si la almohadilla verde se satura de sudor, deséchela y reemplácela. La venda no se puede «secar» y reutilizar.
- Se puede usar otro SportsWrap durante 5 días adicionales. El uso continuado contribuirá a mantener la comodidad.
- ¡Siga usando la venda incluso cuando se sienta mejor!
- Ajuste la venda periódicamente para mantener el contacto y la comodidad.

ALMACENAMIENTO

Mantenga la venda seca y almacénala a temperatura y humedad ambiente.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe ser reportado, por el usuario y/o el paciente, a Ferris Mfg. Corp. y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

FR

ROULEAU Soulagement durable de la douleur sans médicaments

DESCRIPTION DU PRODUIT

SportsWrap est une mousse de polyuréthane hydrophile breveté. Le film extérieur, semi-perméable, contrôle la transmission de vapeur d'eau.

INDICATIONS

Pour la gestion locale des enflures, des inflammations, des contusions, des raideurs et des douleurs dues à une blessure aiguë ou chronique lorsque la peau est intacte.

PRÉCAUTIONS

Consultez votre médecin pour toutes les blessures graves, et si les symptômes persistent après l'avoir porté ou augmentent pendant l'utilisation. Non stérile. Ne convient pas en cas de lésion de la peau ou de plaies ouvertes. Pour usage externe seulement.

PRÉPARATION

Nettoyer la peau des saletés, des médicaments topiques et des lotions. L'humidité résiduelle sur la peau est bénéfique.

APPLICATION

Appliquer dès que possible après la blessure. SportsWrap offre une flexibilité d'application.

Quelle que soit la méthode d'application utilisée ou la partie du corps qui doit être enveloppée, les étapes suivantes s'appliquent :

- Étape 1** Dérouler la membrane verte avec « THIS SIDE OUT » (cette côté en dehors) loin de la peau.
- Étape 2** Envelopper dans un mouvement continu en chevauchant légèrement.
- Étape 3** Fixer la mousse verte avec du ruban athlétique ou adhésif.

Enveloppez fermement en contact intime avec la peau, mais appliquez doucement pour maintenir le confort. Pour être efficace, la mousse verte doit rester en contact serré avec la peau.

AJUSTAGE

Selon l'anatomie et la technique de pansement utilisée, le SportsWrap peut être trop long. La mousse verte peut être égalisée avec une paire de ciseaux si nécessaire. Remplacer la portion inutilisée dans le sachet refermable. Faire chevaucher pour assurer une couverture complète.



PORT

- Porter jour et nuit pendant 5 jours.
- Éviter de mouiller le pansement. Retirer avant de prendre un bain ou une douche.
- Si la mousse verte devient saturée de sueur, le jeter et le remplacer. Le pansement ne peut pas être séché ni réutilisé.
- Un autre SportsWrap peut être porté pendant 5 jours supplémentaires. L'utilisation continue aidera à promouvoir un confort continu.
- Continuez à le porter même lorsque vous vous sentez mieux !
- Ajuster périodiquement pour maintenir le contact et le confort.

STOCKAGE

Garder au sec et conserver à température et humidité ambiantes.

Tout incident sérieux survenu par rapport à ce dispositif doit faire l'objet d'un rapport, par l'utilisateur de l'appareil et/ou par le patient, adressé à Ferris Mfg. Corp. et les autorités compétentes de l'État membre où réside cet utilisateur et/ou patient.

DE

ROLLE Langanhaltende Schmerzlinderung ohne Arzneimittel

PRODUKTBESCHREIBUNG

SportsWrap ist ein patentiertes, hydrophiles Membran-Polster aus Polyurethan. Die halbdurchlässige Rückseite basiert auf Dünnschnitttechnik und ist für Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit optimiert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur örtlichen Behandlung von Schwellungen, Entzündungen, Prellungen und Versteifungen oder Schmerzen auf Grund von akuten oder chronischen Verletzungen, insofern die Haut noch unversehrt ist.

WICHTIGE HINWEISE

Bei allen schweren Verletzungen und anhaltenden oder zunehmenden Beschwerden nach Benutzung sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Nicht steril. Nicht geeignet bei offenen Hautstellen oder offenen Wunden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

VOR DER ANWENDUNG

Säubern Sie die Haut von Schmutz, Salben und Cremes. Restfeuchte auf der Haut ist vorteilhaft.

ANWENDUNGSHINWEISE Unmittelbar nach der Verletzung anwenden. SportsWrap bietet Flexibilität bei der Anwendung.

Egal, welche Methode der Anwendung Sie verwenden, oder welchen Teil des Körpers Sie verbinden wollen, es gelten die folgenden Anweisungen:

- Schritt 1** Entrollen Sie das grüne Polster; dabei muss die Seite beschriftet mit "THIS SIDE OUT" (diese Seite Aussen) von der Haut abgewandt sein.
- Schritt 2** Wickeln Sie mit gleichmäßigen Bewegungen bei nur geringfügiger Überlappung ab.
- Schritt 3** Polster mit Tape oder Heftpflaster fixieren.

Es soll sich bequem anfühlen, aber wickeln Sie dennoch straff genug, um direkten Hautkontakt zu gewährleisten. Um effektiv zu sein, muss das grüne Polster direkt auf der Haut aufliegen.

ZUSCHNITT

Je nach Anatomie und Wickeltechnik, ist das SportsWrap möglicherweise zu lang. Das grüne Polster kann bei Bedarf mit einer Schere gekürzt werden. Den unbenutzten Rest wieder in den wiederverschließbaren Beutel einpacken. Achten Sie auf Überlappung, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.



GEBRAUCHSINFORMATIONEN

- Anwendung bei Tag und Nacht, für 5 Tage.
- Vermeiden Sie die Benetzung des Wickels. Entfernen Sie das Produkt, bevor Sie ein Bad nehmen oder duschen.
- Wenn das grüne Polster mit Schweiß gesättigt ist, sollte man es wegwerfen und ersetzen, es kann nicht getrocknet und wiederverwendet werden.
- Es ist möglich, ein weiteres SportsWrap für zusätzliche 5 Tage zu tragen. Eine fortgesetzte Anwendung hilft dabei, das Wohlfühlgefühl zu bewahren.
- Tragen Sie es weiter, selbst wenn Sie sich besser fühlen!
- Passen Sie es in regelmäßigen Abständen an, um Hautkontakt und Komfort zu gewährleisten.

LAGERUNG

Trocken halten und bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit lagern.

Sämtliche schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt müssen vom Anwender und/oder Patienten Ferris Mfg. Corp. und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ROTOLO

Sollievo del dolore a lunga durata e senza farmaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SportsWrap è una membrana di poliuretano idrofilo brevettato. Il film esterno, semipermeabile, controllerà la trasmissione di vapore acqueo.

INDICAZIONI

Per il trattamento locale di gonfiore, infiammazione, bruciore, rigidità o dolore dovuti a lesioni acute o croniche quando la pelle è intatta.

PRECAUZIONI

Consultare il medico in caso di ferite gravi e se i sintomi persistono dopo l'applicazione o durante l'uso del prodotto. Non sterile. Non adattare a pelle lesa o a ferite aperte. Solo per uso esterno.

PREPARAZIONE

Rimuovere dalla pelle sporca, medicinali e lozioni. I residui di umidità sulla pelle sono vantaggiosi.

APPLICAZIONE

Applicare il prima possibile dopo la ferita. SportsWrap garantisce un'applicazione versatile.

Sarà necessaria la seguente procedura per qualsiasi metodo di applicazione utilizzato o parte del corpo da trattare:

Passo 1 Srotolare la schiuma verde mantenendo la scritta "THIS SIDE OUT" (lato esterno) lontano dalla pelle.

Passo 2 Avvolgere con un movimento continuo sovrapponendo leggermente.

Passo 3 Fissare la schiuma verde con nastro atletico o adesivo.

Avvolgere saldamente per un contatto ravvicinato con l'epidermide, ma applicare delicatamente per mantenere il comfort. La schiuma verde deve essere a stretto contatto con la pelle per funzionare con efficacia.

COME TAGLIARE

A seconda dell'anatomia e della tecnica di avvolgimento, il rotolo SportsWrap potrebbe essere troppo lungo. Se necessario, il tampone verde può essere tagliato con delle forbici. Percorrere la parte inutilizzata nel sacchetto richiudibile. Sovrapporre per garantire la copertura completa.



UTILIZZO

1. Indossare giorno e notte per 5 giorni.
2. Evitare di bagnare la fascia. Rimuovere prima di fare un bagno o una doccia.
3. Se la schiuma verde si impregna di sudore, gettare e sostituire. La fascia non può essere essiccata e riutilizzata.
4. Un'altra medicazione SportsWrap può essere indossata per ulteriori 5 giorni. L'uso ininterrotto assicurerà un comfort prolungato.
5. Continuare ad indossare anche se le condizioni sono migliorate.
6. Regolare periodicamente per mantenere il contatto e il comfort.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato dall'utente e/o dal paziente a Ferris Mfg. Corp. e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

RULL

Langvarig, legemiddelfri smertelindring

PRODUKTBESKRIVELSE

SportsWrap er en patentert, hydrofil membranbandasje i polyuretan. Den semipermeable, heldekkende filmen er perfekt tilpasset og slipper gjennom fuktighet.

BRUKSOMRÅDE

For lokal behandling av hevelse, inflammasjon, blåmerker, stivhet eller smerte forårsaket av akutt eller kronisk skade når huden er intakt.

KONTRAINDIKASJONER

Konsulter lege angående alle alvorlige skader, og hvis symptomene fortsetter etter avsluttet bruk eller forverres under bruk. Ikke steril. Ikke til bruk på skadet hud eller åpne sår. Kun til utvortes bruk.

FORBEREDELSE

Vask huden ren for skitt, topiske medisiner og salver/kremer. Rester av fuktighet på huden er en fordel.

PÅFØRING

Påfør så snart som mulig etter skade. SportsWrap tillater fleksibilitet under påføringen.

Uansett hvilken påføringsmetode du velger eller hvilken del av kroppen du velger å bandasjere gjelder følgende trinn:

Trinn 1 Rull ut den grønne puten med «THIS SIDE OUT» (Denne siden ut) bort fra huden.


Trinn 2 Bandasjer med en kontinuerlig bevegelse slik at bandasjen overlapper litt.

Trinn 3 Fest puten med sportsteip eller lignende. Fortsettes på baksiden.

Bandasjen skal sitte stramt nok til å holde kontakt med huden, men samtidig varsomt nok til at det er komfortabelt. Den grønne puten må være i tett kontakt med huden for å fungere effektivt.

TILSKJÆRING

Bandasjen kan være for lang, avhengig av kroppens anatomi og bandasjeringsteknikken. Den grønne puten kan skjæres med en saks ved behov. Legg den ubrukte delen tilbake i den forseglbare posen. Bandasjen skal overlappe for å sikre full dekning.

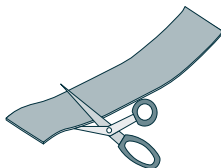

BRUK

1. Bruk døgnet rundt i fem dager.
2. Unngå at bandasjen blir våt. Fjern før bading eller dusjing.
3. Hvis den grønne puten blir gjennomtrukket av svette, må bandasjen kastes og erstattes av en ny. Bandasjen kan ikke tørkes og brukes igjen.
4. En ny SportsWrap kan brukes i ytterligere fem dager etter den første. Fortsett bruk vil fremme langvarig komfort.
5. Fortsett å bruke selv om du føler deg bedre!
6. Juster av og til for å sikre komfort og kontakt med huden.

LAGRING

Hold tørr og lagre ved romtemperatur og -fuktighet.

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med denne enheten skal rapporteres av brukeren og/eller pasienten til Ferris Mfg. Corp. og vedkommende myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

RULLE

Långtidsverkande, läkemedelsfri smärtlindring

PRODUKTBESKRIVNING

SportsWrap är ett patenterat förband i hydrofilt polyuretan. På baksidanfinns det en tunn genomsläpplig film som släpper ut fukt.

INDIKATIONER

Mot lokal svullnad, inflammation, blåmärken, stelhet eller smärta på grund av akut eller kronisk skada där huden är intakt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Rådgör med din läkare vid alla allvarliga skador och om symtomen kvarstår vid påfrestning eller ökar i styrka. Inte sterilt. Inte för skadad hud eller öppna sår. Enbart för utvärtets bruk.

FÖRBEREDELSE

Rengör huden från smuts, utvärtets läkemedel och krämer. Kvarvarande fukt på huden är välgörande.

ANVÄNDNING

Applicera så snart som möjligt efter skada. SportsWrap är flexibelt efter det satts på.

Oavsett vilken metod du använder eller vilken del av kroppen du önskar applicerar förbandet på, ska du följa stegen nedan:

Steg 1 Rulla ut den gröna dynan med "THIS SIDE OUT" (denna sida ut) bort från huden.

Steg 2 Linda med jämna rörelser.

Steg 3 Fäst förbandet med sporttejp eller häftplåster.

Linda stadigt, men försiktigt i nära kontakt med huden för att bibehålla känslan av bekvämlighet. Den gröna dynan måste vara i direktkontakt med huden för att fungera effektivt.

ANPASSNING

Beroende på anatomi och förbandsteknik kan SportsWrap vara för långt. Den gröna dynan kan vid behov anpassas med en sax. Lägg tillbaka den oanvända delen i den återförslutningsbara påsen. Låt förbandet överlappa för att säkerställa att det täcker.



ANVÄNDA FÖRBANDET

1. Använd det dygnet runt under 5 dagar.
2. Se till att förbandet inte blir vått. Ta av förbandet före bad eller dusch.
3. Om det gröna förbandet fylls med svett, kassera och byt ut. Förbandet får inte "torkas" och återanvändas.
4. En ny SportsWrap kan bäras under ytterligare 5 dagar. Vid fortsatt användning blir förbandet bekvämare.
5. Fortsätt använda förbandet även om du känner dig bättre!
6. Justera med jämna mellanrum för att bibehålla kontakten mot huden och känslan av bekvämlighet.

FÖRVARING

Se till att förbandet håller sig torrt och förvara det vid normal rumstemperatur och fuktighet.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med den här enheten bör rapporteras, av användaren och/eller patienten, till Ferris Mfg. Corp. och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

RULO BANDAJ

Uzun Süreli, İlaçsız Ağrı Giderme

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SportsWrap, patentli, hidrofilik, poliüretan membran peddir. Yarı geçirgen sürekli ince film destek, nem buhari geçirgenliği için optimize edilmiştir.

ENDİKASYONLAR

Ciltte hasar olmaması durumunda, akut veya kronik yaralanmalara bağlı şişlik, iltihaplanma, morarma, sertlik veya ağrının lokal tedavisi için.

ÖNLEMLER

Ciddi yaralanmalarda ve kullanımdan sonra semptomların devam etmesi veya kullanım sırasında artması durumunda doktorunuza danışın. Steril değildir. Yaralı veya açık yaralı ciltlerde kullanmayın. Yalnızca harici kullanım içindir.

HAZIRLIK

Ciltteki kiri, topikal ilaçları ve losyonları temizleyin. Ciltte kalan nem faydalıdır.

UYGULAMA

Yaralanmadan sonra mümkün olduğunca kısa bir sürede uygulayın. SportsWrap, uygulama esnekliği sağlar.

Hangi uygulama yöntemini kullanırsanız kullanın veya vücudun hangi bölümünü sarmayı seçerseniz seçin, aşağıdaki adımlar geçerlidir:

Adım 1 Yeşil pedi, "BU TARAF DIŞA" yazan tarafı ciltten uzağa gelecek şekilde açın.

Adım 2 Hafifçe üst üste gelecek şekilde sürekli hareketlerle sarın.

Adım 3 Pedi spor bandı ile veya yapışkan bantla sabitleyin.

Cilde sıkı temas etmesi için sıkıca sarın, ancak rahatlığı korumak için nazikçe uygulayın. Yeşil ped, etkili bir şekilde çalışabilmesi için ciltle sıkı temas halinde olmalıdır.

KESME

Anatomiye ve sarma tekniğine bağlı olarak, SportsWrap çok uzun kalabilir. Gerekirse yeşil pedi bir makasla kesebilirsiniz. Kullanılmayan kısmı, yeniden kapatılabilir torbaya geri koyun. Tam kaplama sağlamak için üst üste bindirin.



KULLANIM

1. 5 gün süreyle gün boyu ve gece boyunca takın.
2. Sargıyı ıslatmaktan kaçının. Banyo veya duştan önce çıkarın.
3. Yeşil ped terle tamamen ıslanırsa, atın ve yenisiyle değiştirin. Sargı "kurutulup" tekrar kullanılamaz.
4. Başka bir SportsWrap, 5 gün daha takılabilir. Sürekli kullanım, sürekli konforu destekleyecektir.
5. Kendinizi daha iyi hissetmeniz bile kullanmaya devam edin!
6. Temas ve konforu sürdürmek için düzenli aralıklarla ayarlayın.

SAKLAMA

Kuru tutun ve oda sıcaklığında ve neminde saklayın.

Bu cihazla ilgili meydana gelen herhangi bir ciddi olay, kullanıcı ve/veya hasta tarafından Ferris Mfg. şirketine bildirilmelidir. Şirket ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamı.